

# VIROSTOP

PASTILLES | PASTILLEN | PASTILLAS | PASTIGLIE



**citrus**

zitrus | citrico | limonene

## EN Instructions for use fytofontana VIROSTOP pastilles Citrus flavor

Before use, carefully study the instructions for use. Keep the instructions for use in case of future use.

Cold and flu are among the most common infectious respiratory tract diseases with significant overall symptoms. They start suddenly, so it's important to intervene quickly and promptly. These diseases (including the common cold) are caused by viruses that are transmitted through infection via mucous membranes into the body, where they begin to rapidly multiply. This is a medical device with an innovative mechanism of action. Thanks to its rich content of polyphenols, the extract from *Cistus creticus* creates a protective film on the mucous membranes of the mouth and throat. This protective barrier constitutes a physical (mechanical) defense against viruses and bacteria, preventing their penetration and further multiplication. The site of action of the medical device is on the mucosa of the upper respiratory tract - specifically on the mucosa of the oral cavity for oral spray/pastilles and on the mucosa of the nasal cavity for nasal spray. Other ingredients included - citric bioflavonoids, purple coneflower (echinacea purpurea), common sage, and Barbados cherry (acerola) strengthen the antiviral neutralizing effect.

**Ingredients in 1 pastille:** *Cistus creticus* extract (58 mg), purple coneflower (echinacea purpurea) extract (93.75 mg), common sage (*Salvia officinalis*) extract (27 mg), citric bioflavonoid complex (1.55 mg), acerola extract (75 mg), sorbitol, xylitol, citric acid, magnesium stearate, flavor: lime, lemon

**Intended use:** Fytofontana VIROSTOP is intended as a protective barrier against viruses causing inflammation of the upper respiratory tract by application to the mucosa of the upper respiratory tract.

**Indications:** Redness of the mucosa in upper respiratory tract inflammation.

**Main mechanism of action:** The main mechanism of action of the medical device fytofontana VIROSTOP pastilles lies in its ability to cover the mucous membranes of the oral cavity with a protective film, thereby preventing the penetration of viruses into the body.

**Contraindications:** Allergy to any of the ingredients of the medical device (listed in the Ingredients section).

**Side effects:** When using fytofontana VIROSTOP pastilles, you may experience temporary mild irritation of the mucosa. These sensations are temporary and natural.

**Intended users/patients:** The medical device fytofontana VIROSTOP pastilles is intended for adults and children over 12 years old.

**Limitations of use for the population:** The duration of use of the medical device depends on the persistence of symptoms but should not exceed 7 days.

### Preventive measures and warnings:

- Do not use in children under 12 years of age. Older children should use the product only under the supervision of an adult.
- For pregnant and breastfeeding women, consultation with a medical specialist regarding usage is recommended.
- Do not use the product if you have had surgical procedures in the nose or mouth area, or if the mucous membrane of the upper respiratory tract has been damaged.
- Keep out of reach of small children.

Minor color variations in the pastilles are caused by the use of plant-based ingredients and do not affect the quality of the product in any way.

**Dosage:** Adults and children over 12 years old may suck on one pastille every 3-4 hours if necessary, but no more than 3 pastilles per day. The pastilles are suitable for long-term preventive use. In case of higher risk of infection, you can use them up to 5x a day. It is very important to use them in the evening before bedtime after brushing your teeth. The pastilles are intended for sucking. Do not swallow the pastilles whole or chew them. Allow them to dissolve slowly in the mouth to achieve the desired effect.

**The main benefit for the patient lies in the impact on public health through the use of VIROSTOP, where:**

- Polyphenols support the local immunity of the upper respiratory tract in the early stage of infection.
- Improvement in quality of life by reducing the duration of symptoms causing upper respiratory tract infections.
- Preventive use of VIROSTOP during periods of increased infection prevalence in communities reduces susceptibility to risks of upper respiratory tract infections.

**Package contents:** 10, 20, 50 pastilles in blisters

**Lifespan of the medical device:** The lifespan of the medical device is determined by the expiration date on the product packaging - 36 months from the date of manufacture.

**Accessory or compatible medical devices:** VIROSTOP medical device does not have any accessories or compatible medical devices.

### Storage:

The information is provided on the packaging

**Disposal:** Return any unused product to the pharmacy. Dispose of clean packaging materials in the appropriate recycling bin.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Slovak Republic, under license from Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Switzerland

www.virostop.info  
www.fytofontana.com



**Residual risks, limitations of use, further information:** Any suspicions of adverse events or adverse effects caused by the device should be reported by the user to the manufacturer and the relevant authority in the member state where the user resides. The manufacturer conducts a detailed risk analysis of the evaluated medical device as a continuous process during design and development and in the production phase of the medical device according to EN ISO 13485:2016 and Regulation 2017/745/MDR. A risk analysis according to EN ISO 14971:2019 has been developed for the evaluated medical device. The risk analysis is regularly updated based on the results of post-market surveillance of the medical device /PMS/.

Explanation of symbols	
	See instructions for use
	Best before
	Temperature limit
	Protect from sunlight
	Mark of conformity
	Medical device
	Reference number
	Unique Device Identifier
	Warning

Date of issue: 11.12.2023

## D Gebrauchsanleitung fytofontana VIROSTOP Pastillen Zitrusgeschmack

Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den Fall eines weiteren Gebrauchs auf.

Grippe und Erkältungen gehören zu den häufigsten Infektionserkrankungen der Atemwege mit typischen Symptomen. Sie beginnen plötzlich, deshalb muss man schnell und rechtzeitig eingreifen. Diese Erkrankungen (einschließlich Schnupfen) werden von Viren ausgelöst, die bei einer Infektion über die Schleimhäute in den Organismus übertragen, wo sie sich schnell vermehren. Es handelt sich um ein Medizinprodukt mit innovativem Wirkmechanismus. Dank der reichlich enthaltenen Polyphenole bildet der Extrakt aus *Cistus creticus* einen Schutzfilm auf den Schleimhäuten von Mund und Hals. Diese Schutzbarriere dient als physikalische (mechanische) Abwehr gegen Viren und Bakterien, verhindert ihr Eindringen und eine weitere Vermehrung. Das Medizinprodukt wirkt auf der Schleimhaut der oberen Atemwege - konkret auf der Mundschleimhaut bei Mundspray/Pastillen und auf der Nasenschleimhaut bei Nasenspray. Weitere Inhaltsstoffe - Zitrus-Bioflavonoide, Purpursonnenhut, Echter Salbei und Barbados-Kirsche (Acerola) verstärken die neutralisierende Wirkung gegen Viren.

**Zusammensetzung 1 Pastille:** Kretische Zitrose - Extrakt (58 mg), Purpursonnenhut - Extrakt (93,75 mg), Echter Salbei - Extrakt (27 mg), Zitrus-Bioflavon-Komplex (1,55 mg), Acerola-Extrakt (75 mg), Sorbitol, Xylitol, Zitronensäure, Magnesiumstearat, Aroma: Limette, Zitrone

**Bestimmungszweck:** Fytofontana VIROSTOP ist als Schutzbarriere gegen Viren bestimmt, die eine Entzündung der oberen Atemwege verursachen, indem es auf die Schleimhaut der oberen Atemwege aufgetragen wird.

**Indikation:** Schleimhautrötung bei Entzündung der oberen Atemwege.

**Hauptwirkungsmechanismus:** Der Hauptwirkungsmechanismus des Medizinprodukts fytofontana VIROSTOP Pastillen besteht darin, dass es die Schleimhäute der Mundhöhle mit einem Schutzfilm bedeckt und so ein Eindringen der Viren in den Körper verhindert.

**Kontraindikationen:** Allergien auf einen Bestandteil des Medizinprodukts (die im Abschnitt Zusammensetzung angegeben sind).

**Nebenwirkungen:** Nach der Anwendung von fytofontana VIROSTOP Pastillen kann es vorübergehend zu einem leichten Kribbeln auf der Zunge kommen. Diese Gefühle sind vorübergehend und natürlich.

**Vorgeschene Benutzer/Patienten:** Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP Pastillen ist für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren bestimmt.

**Nutzungseinschränkungen des Produkts für die Bevölkerung:** Die Anwendungsdauer des Medizinprodukts hängt vom Anhalten der Symptome ab, sollte aber nicht mehr als 7 Tage betragen.

### Prophylaktische Maßnahmen und Hinweise:

- Nicht bei Kindern unter 12 Jahren verwenden. Ältere Kinder sollten das Präparat nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Schwangere und stillende Frauen wird hinsichtlich des Gebrauchs die Rücksprache mit einem Facharzt empfohlen.
- Nach chirurgischen Eingriffen im Nasen- und Mundbereich oder bei einer beschädigten Schleimhaut der oberen Atemwege wird von der Verwendung des Präparats abgeraten.
- Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Eine leichte Verfärbung der Pastillen ist auf die Verwendung von pflanzlichen Inhaltsstoffen zurückzuführen und beeinträchtigt die Qualität des Präparats in keiner Weise.

**Dosierung:** Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren können bei Bedarf aller 3-4 Stunden eine Pastille lutschen, allerdings höchstens 3 Pastillen am Tag. Die Pastillen sind auch für die langzeitige vorbeugende Anwendung geeignet. Wenn Sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, können Sie die Pastillen auch 5x täglich anwenden. Sehr wichtig ist die Anwendung abends vor dem Schlafen. Die Pastillen sind zum Lutschen bestimmt. Die Pastillen nicht im Ganzen schlucken oder zerbeißen. Für die erwünschte Wirkung sollen sie sich langsam im Mund auflösen.

**Der Hauptnutzen für den Patienten besteht im Einfluss auf die öffentliche Gesundheit durch die Verwendung von VIROSTOP, denn:**

- Polyphenole fördern die lokalen Abwehrkräfte der oberen Atemwege im Frühstadium der Infektion.
- Eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Verkürzung der Symptome einer Infektion der oberen Atemwege.
- Die prophylaktische Anwendung von VIROSTOP in Zeiten eines vermehrten Auftretens von Infektionen im Kollektiv verringert die Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege.

**Packungsinhalt:** 10, 20, 50 Pastillen in Blister

**Halbbarkeitsdauer des Medizinprodukts:** Die Halbbarkeitsdauer des Medizinprodukts wird durch das Verfallsdatum auf der Produktverpackung bestimmt - 36 Monate ab dem Herstellungsdatum.

**Zubehör oder kompatible Medizinprodukte:** Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP hat kein Zubehör und auch keine kompatiblen Medizinprodukte.

### Lagerung:

Angaben sind auf der Verpackung angegeben

**Entsorgung:** Das unverbrauchte Präparat in die Apotheke zurückbringen. Sauberes Verpackungsmaterial im entsprechenden Sammelbehälter entsorgen.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Slowakische Republik nach einer Lizenz der Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Schweiz

www.virostop.info  
www.fytofontana.com



**Restrisiken, Gebrauchseinschränkungen, weitere Informationen:** Jeden Verdacht auf ein unerwünschtes Ereignis oder ein unerwünschtes Ereignis, das durch das Produkt verursacht wurde, sollte der Anwender dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem Mitgliedsstaat melden, in dem der Anwender seinen Wohnsitz hat. Der Hersteller führt eine detaillierte Risikoanalyse des zu bewertenden Medizinprodukts als fortlaufenden Prozess während der Entwurfs- und Entwicklungs- sowie der Produktionsphase des Medizinprodukts gemäß EN ISO 13485:2016 und der Verordnung 2017/745/MDR durch. Für das zu bewertende Medizinprodukt wurde eine Risikoanalyse gemäß EN ISO 14971:2019 erstellt. Die Risikoanalyse wird regelmäßig auf der Grundlage der Ergebnisse der Überwachung des Medizinprodukts nach dem Inverkehrbringen /PMS/ aktualisiert.

Erläuterung der Symbole	
	Gebrauchsanleitung beachten
	Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung
	CE-Kennzeichnung
	Referenznummer
	Vorsicht
	Hersteller
	Chargennummer
	Vor Sonnenlicht schützen
	Medizinprodukt
	Einmalige Produktkennung

Ausstellungsdatum: 11.12.2023



citrus | zitrus | citrico | limone

## ES Instrucciones de uso fytofontana VIROSTOP pastillas sabor cítrico

Antes de usar, lea atentamente las instrucciones de uso. Guarde las instrucciones de uso en caso de que las necesite en el futuro.

La gripe y el resfriado pertenecen a las enfermedades respiratorias contagiosas más frecuentes y se caracterizan por síntomas generales muy evidentes. Empezian de inmediato, por eso es necesario tomar acción rápidamente y a tiempo. Estas enfermedades (goteo nasal incluido) son causadas por virus que se contagian a través de la mucosa al organismo y se replican muy rápido. Se trata de un dispositivo médico con un mecanismo de acción innovativo. El extracto de *cistus creticus* crea una película protectora sobre la mucosa bucal y la garganta gracias a su abundante contenido en polifenoles. Esta barrera protectora es una protección física (mecánica) contra los virus y bacterias, porque inhibe su penetración y consiguiente replicación en el organismo. El lugar de actuación del dispositivo médico es la mucosa de las vías respiratorias superiores, en concreto, la mucosa de la cavidad bucal, en el caso del spray oral/pastillas, y la mucosa de la cavidad nasal, en el caso del spray nasal. Otros ingredientes incluidos - bioflavonoides cítricos, echinacea purpurea, salvia officinalis y acerola, que refuerzan el efecto neutralizante antiviral.

**Ingredientes en 1 pastilla:** Extracto de Jara cretense (58 mg), extracto de echinacea purpurea (93,75 mg), extracto de salvia officinalis (27 mg), complejo de bioflavonoides cítricos (1,55 mg), extracto de acerola (75 mg), sorbitol, xilitol, ácido cítrico, estearato de magnesio, aroma: lima, limón

**Objetivo de uso:** Fytofontana VIROSTOP se usa como barrera protectora ante los virus que causan la inflamación de las vías respiratorias superiores y se aplica sobre la mucosa de las vías respiratorias superiores.

**Indicación:** Para el enrojecimiento de la mucosa como resultado de la inflamación de las vías respiratorias superiores.

**Mecanismo de acción principal:** El mecanismo de acción principal del dispositivo médico fytofontana VIROSTOP pastillas consiste en cubrir la mucosa de la cavidad bucal con una película protectora e inhibir así la penetración de los virus al organismo.

**Contraindicaciones:** Reacción alérgica a cualquier ingrediente del dispositivo médico (mencionado en el párrafo Ingredientes).

**Efectos secundarios:** Al utilizar fytofontana VIROSTOP pastillas puede sentir temporalmente un leve hormigueo en la lengua. Estos efectos son temporales y naturales.

**Usuarios/pacientes designados:** El dispositivo médico fytofontana VIROSTOP pastillas está destinado a adultos y a niños mayores de 12 años.

**Restricciones de uso del dispositivo para la población:** El periodo de uso del dispositivo médico depende de la duración de los síntomas, pero no se recomienda usarlo más de 7 días.

### Medidas preventivas y advertencias:

- No utilizar en niños menores de 12 años. En caso de niños a partir de 12 años el producto se puede utilizar solo bajo la supervisión de un adulto.
- En caso de mujeres embarazadas y lactantes se recomienda consultar el uso con el médico especializado.
- No recomendamos el uso del producto, si usted ha sido intervenido quirúrgicamente en la zona de la nariz o la boca o si la mucosa de las vías respiratorias superiores está dañada.
- Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Los leves cambios del color de las pastillas están causados por el uso de ingredientes herbarales y no influyen la calidad de la preparación de ninguna manera.

**Dosificación:** Si es necesario, los adultos y niños a partir de 12 años pueden chupar una pastilla cada 3-4 horas, sin embargo, no se debe exceder un máximo de 3 pastillas por día. Las pastillas son adecuadas también para el uso preventivo prolongado. Si está expuesto a un mayor riesgo de infección, puede chupar hasta 5 pastillas al día. Es especialmente importante aplicarlas abiendo antes de dormir, después de lavarse los dientes. Las pastillas se deben chupar. No trague las pastillas enteras ni las muerda. Para un efecto óptimo debe dejar que las pastillas se disuelvan lentamente en la boca.

**El beneficio principal para el paciente es el impacto en la salud pública al usar VIROSTOP pues:**

- Los polifenoles refuerzan la inmunidad local de las vías respiratorias superiores en la etapa temprana de la infección.
- Mejora de la calidad de vida al reducir la duración de los síntomas que causan la infección de las vías respiratorias superiores.
- El uso preventivo de VIROSTOP durante el periodo de mayor incidencia de infecciones en algunos grupos disminuye la susceptibilidad a los riesgos de infección de las vías respiratorias superiores.

**Contenido del paquete:** 10, 20, 50 pastillas en blísteres

**Vida útil del dispositivo médico:** La vida útil del dispositivo médico se determina por la fecha de expiración impresa en el embalaje del producto: 36 meses desde la fecha de fabricación.

**Accesorios o dispositivos médicos compatibles:** El dispositivo médico fytofontana VIROSTOP no tiene accesorios ni dispositivos médicos compatibles.

### Almacenamiento:

Los datos están indicados en el embalaje

**Disposición de residuos:** Devuelva la preparación no utilizada a la farmacia. Deseche el material de embalaje limpio en el contenedor adecuado para los residuos clasificados.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Eslovaquia según la licencia Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Suiza

www.virostop.info  
www.fytofontana.com



**Riesgos residuales, limitaciones de uso, información adicional:** El usuario debe comunicar cualquier sospecha de acontecimiento adverso o un acontecimiento adverso concreto causado por el producto al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que reside. El fabricante realiza un análisis de riesgos detallado relacionado con el dispositivo médico evaluado como un proceso constante durante el diseño y desarrollo y en el proceso de la fase de producción del dispositivo médico de acuerdo a la norma EN ISO 13485:2016 y el Reglamento 2017/745/MDR. Se llevó a cabo un análisis de riesgos para el dispositivo médico evaluado según la norma EN ISO 14971:2019. El análisis de riesgos se actualiza de forma periódica según los resultados de vigilancia posterior a la comercialización del dispositivo médico /PMS/.

Definiciones de los símbolos	
	Vea las instrucciones de uso
	Util hasta
	Límite de temperaturas
	Marca de conformidad
	Número de referencia
	Advertencia
	El fabricante
	Número de lote
	Proteja del sol
	Dispositivo médico
	Identificador único del dispositivo

Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2023

## IT Foglio illustrativo fytofontana VIROSTOP pastiglie gusto limone

Leggere attentamente il foglio illustrativo prima dell'uso. Conservare il foglio illustrativo in caso di utilizzo futuro.

L'influenza e il raffreddore figurano tra le più comuni malattie infettive delle vie respiratorie con sintomi generali significativi. Inorgano all'improvviso, quindi è necessario agire rapidamente e in tempo. Queste malattie (compreso il comune raffreddore) sono causate da virus che vengono trasmessi all'organismo tramite infezione attraverso le mucose, dove iniziano a moltiplicarsi rapidamente. Si tratta di un dispositivo medico con meccanismo d'azione innovativo. Grazie ai polifenoli, di cui è assai ricco, l'estratto di cisto di Creta crea una pellicola protettiva sulle mucose della bocca e della gola. Questa barriera protettiva rappresenta una protezione fisica (meccanica) contro virus e batteri, impedendo la loro penetrazione e la loro ulteriore moltiplicazione. Il luogo di azione del dispositivo medico è la mucosa delle vie respiratorie superiori - nello specifico la mucosa del cavo orale per lo spray orale/pastiglie e la mucosa del cavo nasale per lo spray nasale. Gli altri componenti del prodotto - bioflavonoidi da agrumi, echinacea purpurea, salvia comune e ciliegia delle Barbados (acerola) rafforzano l'effetto neutralizzante antivirale.

**Composizione di 1 pastiglia:** estratto di cisto di creta (58 mg), estratto di echinacea purpurea (93,75 mg), estratto di salvia officinale (27 mg), complesso di bioflavonoidi da agrumi (1,55 mg), estratto di acerola (75 mg), sorbitolo, xilitolo, acido citrico, stearato di magnesio, aroma: limetta, limone

**Finalità d'impiego:** Fytofontana VIROSTOP serve a formare una barriera di protezione contro i virus causa di infiammazione delle vie respiratorie superiori con applicazione sulla mucosa delle vie respiratorie superiori.

**Indicazioni:** Arrossamento della mucosa in caso di infiammazione delle vie respiratorie superiori.

**Principale meccanismo d'azione:** Il principale meccanismo d'azione del dispositivo medico fytofontana VIROSTOP pastiglie consiste nel ricoprire le mucose del cavo orale con un film protettivo, impedendo così la penetrazione dei virus nell'organismo.

**Controindicazioni:** Allergia a uno qualsiasi dei componenti del dispositivo medico (elencati nel paragrafo Composizione).

**Effetti collaterali:** Durante l'impiego di fytofontana VIROSTOP pastiglie è possibile che avvertiate temporaneamente un leggero formicolio sulla lingua. Si tratta di sensazioni temporanee e naturali.

**Utilizzatori/patienti:** Il dispositivo medico fytofontana VIROSTOP pastiglie è indicato per gli adulti e i bambini di età superiore a 12 anni.

**Limitazioni d'uso del dispositivo per la popolazione:** Il periodo di impiego del dispositivo medico dipende dal perdurare dei sintomi, ma non dovrebbe superare i 7 giorni.

### Misure di prevenzione e avvertenze:

- Non impiegare nei bambini di età inferiore a 12 anni. La somministrazione del prodotto deve avvenire sempre sotto la supervisione di una persona adulta.
- Per le donne in gravidanza e in allattamento si consiglia la consultazione con un medico per quanto riguarda l'uso.
- Si sconsiglia di utilizzare il prodotto se avete subito interventi operatori nella regione del collo o bocca o se avete avuto danni alla mucosa delle vie respiratorie superiori.
- Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Le eventuali leggere modifiche alla colorazione delle pastiglie sono dovute all'utilizzo di componenti vegetali nella composizione e non hanno alcuna influenza sulla qualità del prodotto.

**Dosaggio:** Gli adulti e i bambini di età superiore a 12 anni possono assumere, in caso di necessità, una pastiglia ogni 3-4 ore, ma al massimo 3 pastiglie al giorno. Le pastiglie sono idonee anche per uso preventivo a lungo termine. In caso di esposizione a rischio maggiore, è possibile assumere una pastiglia anche 5 volte al giorno. È assai importante l'applicazione serale prima di coricarsi e dopo essersi lavati i denti. Le pastiglie vanno succhiate. Non ingoiare le pastiglie intere e non morderle. Per ottenere gli effetti desiderati è necessario far sciogliere lentamente in bocca le pastiglie.

**L'apporto principale per il paziente è l'influenza sulla salute pubblica, utilizzando VIROSTOP dove:**

- I polifenoli sostengono l'immunità locale delle vie respiratorie superiori nello stadio precoce di un'infezione.
- Miglioramento della qualità della vita con riduzione della durata dei sintomi che causano le infezioni delle vie respiratorie superiori.
- L'uso preventivo di VIROSTOP nel periodo di aumentata presenza di infezione tra le persone riduce la predisposizione ai rischi di infezione delle vie respiratorie superiori.

**Contenuto della confezione:** 10, 20, 50 pastiglie in blister

**Ciclo di vita del dispositivo medico:** Il ciclo di vita del dispositivo medico è determinato dalla data di scadenza riportata sulla confezione del prodotto - 36 mesi dalla data di produzione.

**Accessori o dispositivi medici compatibili:** Il dispositivo medico fytofontana VIROSTOP non è provvisto di accessori o altri dispositivi medici compatibili.

### Immaggazzinaggio:

I dati sono riportati sulla confezione

**Smaltimento:** Restituire il prodotto non utilizzato alla farmacia. Il materiale di imballaggio pulito va smaltito nell'apposito contenitore per i rifiuti industriali.

Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Repubblica Slovacca su licenza della Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Svizzera

www.virostop.info  
www.fytofontana.com



**Rischi residui, limitazioni d'uso, informazioni aggiuntive:** Qualsiasi evento avverso sospetto o evento avverso causato dal dispositivo deve essere segnalato dall'utilizzatore al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore. Il produttore conduce un'analisi dettagliata dei rischi del dispositivo medico valutato, come processo permanente durante la progettazione e lo sviluppo e nella fase di produzione del dispositivo medico secondo EN ISO 13485:2016 e Regolamento 2017/745/MDR. È stata preparata un'analisi dei rischi per il dispositivo medico valutato secondo EN ISO 14971:2019. L'analisi dei rischi viene regolarmente aggiornata sulla base dei risultati del monitoraggio del dispositivo medico dopo il suo collocamento sul mercato /PMS/.

Legenda simboli	
	Vedi foglio illustrativo
	Da consumarsi entro
	Limite temperatura
	Marchio conformità
	Numero riferimento
	Avvertenza
	Produttore
	Numero lotto
	Proteggere contro i raggi solari
	Dispositivo medico
	Identificatore unico del dispositivo

Data di rilascio: 11.12.2023

REF 10032-33-37ENDES-P-1

VIROSTOP PASTILLES | PASTILLEN PASTILLAS | PASTIGLIE

# VIROSTOP

PASTILLES | PASTILLEN | PASTILLAS | PASTIGLIE



## forest fruit

waldfrucht | frutas del bosque | frutti di bosco

## EN Instructions for use fytofontana VIROSTOP pastilles forest fruit flavor

 Before use, carefully study the instructions for use. Keep the instructions for use in case of future use.

Cold and flu are among the most common infectious respiratory tract diseases with significant overall symptoms. They start suddenly, so it's important to intervene quickly and promptly. These diseases (including the common cold) are caused by viruses that are transmitted through infection via mucous membranes into the body, where they begin to rapidly multiply. This is a medical device with an innovative mechanism of action. Thanks to its rich content of polyphenols, the extract from *Cistus creticus* creates a protective film on the mucous membranes of the mouth and throat. This protective barrier constitutes a physical (mechanical) defense against viruses and bacteria, preventing their penetration and further multiplication. The site of action of the medical device is on the mucosa of the upper respiratory tract - specifically on the mucosa of the oral cavity for oral spray/pastilles and on the mucosa of the nasal cavity for nasal spray. Other ingredients included - citric bioflavonoids, purple coneflower (echinacea purpurea), common sage, and Barbados cherry (acerola) strengthen the antiviral neutralizing effect.

**Ingredients in 1 pastille:** *Cistus creticus* extract (58 mg), purple coneflower (echinacea purpurea) extract (93.75 mg), common sage (*Salvia officinalis*) extract (27 mg), citrus bioflavonoid complex (1.55 mg), acerola extract (75 mg), sorbitol, xylitol, citric acid, magnesium stearate, flavors: cherry, raspberry, blueberry

**Intended use:** Fyotfontana VIROSTOP is intended as a protective barrier against viruses causing inflammation of the upper respiratory tract by application to the mucosa of the upper respiratory tract.

**Indications:** Redness of the mucosa in upper respiratory tract inflammation.

**Main mechanism of action:** The main mechanism of action of the medical device fyotfontana VIROSTOP pastilles lies in its ability to cover the mucous membranes of the oral cavity with a protective film, thereby preventing the penetration of viruses into the body.

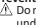

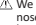

**Contraindications:** Allergy to any of the ingredients of the medical device (listed in the Ingredients section).

**Side effects:** When using fyotfontana VIROSTOP pastilles, you may experience temporary mild irritation of the mucosa. These sensations are temporary and natural.

**Intended users/patients:** The medical device fyotfontana VIROSTOP pastilles is intended for adults and children over 12 years old.

**Limitations of use for the population:** The duration of use of the medical device depends on the persistence of symptoms but should not exceed 7 days.

### Preventive measures and warnings:

-  Do not use in children under 12 years of age. Older children should use the product only under the supervision of an adult.
-  For pregnant and breastfeeding women, consultation with a medical specialist regarding usage is recommended.
-  We do not recommend using the product if you have had surgical procedures in the nose or mouth area, or if the mucous membrane of the upper respiratory tract has been damaged.
-  Keep out of reach of small children.

Minor color variations in the pastilles are caused by the use of plant-based ingredients and do not affect the quality of the product in any way.

**Dosage:** Adults and children over 12 years old may suck on one pastille every 3-4 hours if necessary, but no more than 3 pastilles per day. The pastilles are suitable for long-term preventive use. In case of higher risk of infection, you can use them up to 5x a day. It is very important to use them in the evening before bedtime after brushing your teeth. The pastilles are intended for sucking. Do not swallow the pastilles whole or chew them. Allow them to dissolve slowly in the mouth to achieve the desired effect.

**The main benefit for the patient lies in the impact on public health through the use of VIROSTOP, where:**

- Polyphenols support the local immunity of the upper respiratory tract in the early stage of infection.
- Improvement in quality of life by reducing the duration of symptoms causing upper respiratory tract infections.
- Preventive use of VIROSTOP during periods of increased infection prevalence in communities reduces susceptibility to risks of upper respiratory tract infections.

**Package contents:** 20 pastilles in blisters


**Lifespan of the medical device:** The lifespan of the medical device is determined by the expiration date on the product packaging - 36 months from the date of manufacture.

**Accessory or compatible medical devices:** VIROSTOP medical device does not have any accessories or compatible medical devices.

### Storage:

  The information is provided on the packaging


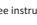
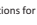





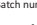
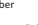


**Disposal:** Return any unused product to the pharmacy. Dispose of clean packaging materials in the appropriate recycling bin.

 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludčice, Slovak Republic, under license from Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Switzerland

www.virostop.info  
www.fyotfontana.com



**Residual risks, limitations of use, further information:** Any suspicions of adverse events or adverse effects caused by the device should be reported by the user to the manufacturer and the relevant authority in the member state where the user resides. The manufacturer conducts a detailed risk analysis of the evaluated medical device as a continuous process during design and development and in the production phase of the medical device according to EN ISO 13485:2016 and Regulation 2017/745/MDR. A risk analysis according to EN ISO 14971:2019 has been developed for the evaluated medical device. The risk analysis is regularly updated based on the results of post-market surveillance of the medical device /PMS/.

Explanation of symbols	
	See instructions for use
	Best before
	Temperature limit
	Protect from sunlight
	Mark of conformity
	Reference number
	Warning
	Manufacturer
	Batch number
	Protect from sunlight
	Medical device
	Unique Device Identifier

Date of issue: 11.12.2023

## D Gebrauchsanleitung fytofontana VIROSTOP Pastillen Waldfruchtgeschmack

 Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den Fall eines weiteren Gebrauchs auf.

Grippe und Erkältungen gehören zu den häufigsten Infektionserkrankungen der Atemwege mit typischen Symptomen. Sie beginnen plötzlich, deshalb muss man schnell und rechtzeitig eingreifen. Diese Erkrankungen (einschließlich Schnupfen) werden von Viren ausgelöst, die bei einer Infektion über die Schleimhäute in den Organismus übertragen, wo sie sich schnell vermehren. Es handelt sich um ein Medizinprodukt mit innovativem Wirkmechanismus. Dank der reichlich enthaltenen Polyphenole bildet der Extrakt aus *Cistus creticus* einen Schutzfilm auf den Schleimhäuten von Mund und Hals. Diese Schutzbarriere dient zur physischen (mechanischen) Abwehr gegen Viren und Bakterien, verhindert ihr Eindringen und eine weitere Vermehrung. Das Medizinprodukt wirkt auf der Schleimhaut der oberen Atemwege – konkret auf der Mundschleimhaut bei Mundspray/Pastillen und auf der Nasenschleimhaut bei Nasenspray. Weitere Inhaltsstoffe – Zitrus-Bioflavonoide, Purpursonnenhut, Echter Salbei und Barbados-Kirsche (Acerola) verstärken die neutralisierende Wirkung gegen Viren.

**Zusammensetzung 1 Pastille:** Kretische Zistrose – Extrakt (58 mg), Purpursonnenhut – Extrakt (93,75 mg), Echter Salbei – Extrakt (27 mg), Zitrus-Bioflavonoide (1,55 mg), Acerola-Extrakt (75 mg), Sorbitol, Xylitol, Zitronensäure, Magnesiumstearat, Aroma: Kirsche, Himbeere, Blaubeere

**Bestimmungszweck:** Fyotfontana VIROSTOP ist als Schutzbarriere gegen Viren bestimmt, die eine Entzündung der oberen Atemwege verursachen, indem es auf die Schleimhaut der oberen Atemwege aufgetragen wird.

**Indikation:** Schleimhautrötung bei Entzündung der oberen Atemwege.

**Hauptwirkungsmechanismus:** Der Hauptwirkungsmechanismus des Medizinprodukts fyotfontana VIROSTOP Pastillen besteht darin, dass es die Schleimhäute der Mundhöhle mit einem Schutzfilm bedeckt und so ein Eindringen der Viren in den Körper verhindert.

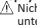
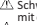
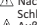
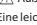
**Kontraindikationen:** Allergie auf einen Bestandteil des Medizinprodukts (die im Abschnitt Zusammensetzung angegeben sind).

**Nebenwirkungen:** Nach der Anwendung von fyotfontana VIROSTOP Pastillen kann es vorübergehend zu einem leichten Kribbeln auf der Zunge kommen. Diese Gefühle sind vorübergehend und natürlich.

**Vorgesehene Benutzer/Patienten:** Das Medizinprodukt fyotfontana VIROSTOP Pastillen ist für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren bestimmt.

**Nutzungseinschränkungen des Produkts für die Bevölkerung:** Die Anwendungsdauer des Medizinprodukts hängt vom Anhalten der Symptome ab, sollte aber nicht mehr als 7 Tage betragen.

### Prophylaktische Maßnahmen und Hinweise:

-  Nicht bei Kindern unter 12 Jahren verwenden. Ältere Kinder sollten das Präparat nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
-  Schwangeren und stillenden Frauen wird hinsichtlich des Gebrauchs die Rücksprache mit einem Facharzt empfohlen.
-  Nach chirurgischen Eingriffen im Nasen- und Mundbereich oder bei einer beschädigten Schleimhaut der oberen Atemwege wird von der Verwendung des Präparats abgeraten.
-  Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Eine leichte Verfärbung der Pastillen ist auf die Verwendung von pflanzlichen Inhaltsstoffen zurückzuführen und beeinträchtigt die Qualität des Präparats in keiner Weise.

**Dosierung:** Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren können bei Bedarf aller 3–4 Stunden eine Pastille lutschen, allerdings höchstens 3 Pastillen am Tag. Die Pastillen sind auch für die langzeitige vorbeugende Anwendung geeignet. Wenn Sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, können Sie die Pastillen auch 5x täglich anwenden. Sehr wichtig ist die Anwendung abends nach dem Zähneputzen vor dem Schlafen. Die Pastillen sind zum Lutschen bestimmt. Die Pastillen nicht im Ganzen schlucken oder zerbeißen. Für die erwünschte Wirkung sollen sie sich langsam im Mund auflösen.

**Der Hauptnutzen für den Patienten besteht im Einfluss auf die öffentliche Gesundheit durch die Verwendung von VIROSTOP, denn:**



- Polyphenole fördern die lokalen Abwehrkräfte der oberen Atemwege im Frühstadium der Infektion.
- Eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Verkürzung der Symptome einer Infektion der oberen Atemwege.
- Die prophylaktische Anwendung von VIROSTOP in Zeiten eines vermehrten Auftretens von Infektionen im Kollektiv verringert die Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege.

**Packungsinhalt:** 20 Pastillen in Blistern


**Halbbarkeitsdauer des Medizinprodukts:** Die Halbbarkeitsdauer des Medizinprodukts wird durch das Verfallsdatum auf der Produktverpackung bestimmt – 36 Monate ab dem Herstellungsdatum.

**Zubehör oder kompatible Medizinprodukte:** Das Medizinprodukt fyotfontana VIROSTOP hat kein Zubehör und auch keine kompatiblen Medizinprodukte.

### Lagerung:

  Angaben sind auf der Verpackung angegeben


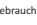






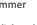


**Entsorgung:** Das unverbrauchte Präparat in die Apotheke zurückbringen. Sauberes Verpackungsmaterial im entsprechenden Sammelbehälter entsorgen.

 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludčice, Slowakische Republik nach einer Lizenz der Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Schweiz

www.virostop.info  
www.fyotfontana.com



**Restrisiken, Gebrauchseinschränkungen, weitere Informationen:** Jeden Verdacht auf ein unerwünschtes Ereignis oder ein unerwünschtes Ereignis, das durch das Produkt verursacht wurde, sollte der Anwender dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem Mitgliedsstaat melden, in dem der Anwender seinen Wohnsitz hat. Der Hersteller führt eine detaillierte Risikoanalyse des zu bewertenden Medizinprodukts als fortlaufenden Prozess während der Entwicklungs- und Entwicklungs- sowie der Produktionsphase des Medizinprodukts gemäß EN ISO 13485:2016 und der Verordnung 2017/745/MDR/ durch. Für das zu bewertende Medizinprodukt wurde eine Risikoanalyse gemäß EN ISO 14971:2019 erstellt. Die Risikoanalyse wird regelmäßig auf der Grundlage der Ergebnisse der Überwachung des Medizinprodukts nach dem Inverkehrbringen /PMS/ aktualisiert.


Erläuterung der Symbole	
	Gebrauchsanleitung beachten
	Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung
	CE-Kennzeichnung
	Referenznummer
	Vorsicht
	Hersteller
	Chargennummer
	Vor Sonnenlicht schützen
	Medizinprodukt
	Einmalige Produktkennung

Ausstellungsdatum: 11.12.2023

# forest fruit | waldfrucht | frutas del bosque | frutti di bosco

# VIROSTOP PASTILLEN | PASTILLEN PASTILLAS | PASTIGLIE

## ES Instrucciones de uso fyotfontana VIROSTOP pastillas sabor a frutas del bosque

 Antes de uso, lea atentamente las instrucciones de uso. Guarde las instrucciones de uso en caso de que las necesite en el futuro.

La gripe y el resfriado pertenecen a las enfermedades respiratorias contagiosas más frecuentes y se caracterizan por síntomas generales muy evidentes. Empezian de inmediato, por eso es necesario tomar acción rápidamente y a tiempo. Estas enfermedades (goteo nasal incluido) son causadas por virus que se contagian a través de la mucosa al organismo y se replican muy rápido. Se trata de un dispositivo médico con un mecanismo de acción innovativo. El extracto de *cistus creticus* crea una película protectora sobre la mucosa bucal y la garganta gracias a su abundante contenido en polifenoles. Esta barrera protectora es una protección física (mecánica) contra los virus y bacterias, porque inhibe su penetración y consiguiente replicación en el organismo. El lugar de actuación del dispositivo médico es la mucosa de las vías respiratorias superiores, en concreto, la mucosa de la cavidad bucal, en el caso del spray oral/pastillas, y la mucosa de la cavidad nasal, en el caso del spray nasal. Otros ingredientes incluidos – bioflavonoides cítricos, echinacea purpurea, salvia officinalis y acerola, que refuerzan el efecto neutralizante antiviral.

**Ingredientes en 1 pastilla:** Extracto de fraja cretense (58 mg), extracto de echinacea purpurea (93,75 mg), extracto de salvia officinalis (27 mg), complejo de bioflavonoides cítricos (1,55 mg), extracto de acerola (75 mg), sorbitol, xilitol, ácido cítrico, estearato de magnesio, aroma: cereza, frambuesa, arándano

**Objetivo de uso:** Fyotfontana VIROSTOP se usa como barrera protectora ante los virus que causan la inflamación de las vías respiratorias superiores y se aplica sobre la mucosa de las vías respiratorias superiores.

**Indicación:** Para el enrojecimiento de la mucosa como resultado de la inflamación de las vías respiratorias superiores.

**Mecanismo de acción principal:** El mecanismo de acción principal del dispositivo médico fyotfontana VIROSTOP pastillas consiste en cubrir la mucosa de la cavidad bucal con una película protectora e inhibir así la penetración de los virus al organismo.


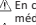
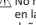
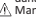
**Contraindicaciones:** Reacción alérgica a cualquier ingrediente del dispositivo médico (mencionado en el párrafo Ingredientes).

**Efectos secundarios:** Al utilizar fyotfontana VIROSTOP pastillas puede sentir temporalmente un leve hormigueo en la lengua. Estos efectos son temporales y naturales.

**Usuarios/pacientes designados:** El dispositivo médico fyotfontana VIROSTOP pastillas está destinado a adultos y a niños mayores de 12 años.

**Restricciones de uso del dispositivo para la población:** El periodo de uso del dispositivo médico depende de la duración de los síntomas, pero no se recomienda usarlos más de 7 días.

### Medidas preventivas y advertencias:

-  No utilizar en niños menores de 12 años. En caso de niños a partir de 12 años el producto se puede utilizar solo bajo la supervisión de un adulto.
-  En caso de mujeres embarazadas y lactantes se recomienda consultar el uso con el médico especializado.
-  No recomendamos el uso del producto, si usted ha sido intervenido quirúrgicamente en la zona de la nariz o la boca o si la mucosa de las vías respiratorias superiores está dañada.
-  Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Los leves cambios del color de las pastillas están causados por el uso de ingredientes herbarales y no influyen la calidad de la preparación de ninguna manera.

**Dosificación:** Si es necesario, los adultos y niños a partir de 12 años pueden chupar una pastilla cada 3–4 horas, sin embargo, no se debe exceder un máximo de 3 pastillas por día. Las pastillas son adecuadas también para el uso preventivo prolongado. Si está expuesto a un mayor riesgo de infección, puede chupar hasta 5 pastillas al día. Es especialmente importante aplicar el producto antes de dormir, después de lavarse los dientes. Las pastillas se deben chupar. No trague las pastillas enteras ni las muerda. Para un efecto óptimo debe dejar que las pastillas se disuelvan lentamente en la boca.

**El beneficio principal para el paciente es el impacto en la salud pública al usar VIROSTOP pues:**



- Los polifenoles refuerzan la inmunidad local de las vías respiratorias superiores en la etapa temprana de la infección.
- Mejora de la calidad de vida al reducir la duración de los síntomas que causan la infección de las vías respiratorias superiores.
- El uso preventivo de VIROSTOP durante el periodo de mayor incidencia de infecciones en grupos diversos disminuye la susceptibilidad a los riesgos de infección de las vías respiratorias superiores.

**Contenido del paquete:** 20 pastillas en blisteres


**Vida útil del dispositivo médico:** La vida útil del dispositivo médico se determina por la fecha de expiración impresa en el embalaje del producto: 36 meses desde la fecha de fabricación.

**Accesorios o dispositivos médicos compatibles:** El dispositivo médico fyotfontana VIROSTOP no tiene accesorios ni dispositivos médicos compatibles.

### Almacenamiento:

  Los datos están indicados en el embalaje

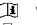

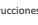




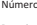
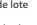


**Disposición de residuos:** Devuelva la preparación no utilizada a la farmacia. Deseche el material de embalaje limpio en el contenedor adecuado para los residuos clasificados.

 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Velké Ludčice, Eslovaquia según la licencia Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Suiza

www.virostop.info  
www.fyotfontana.com



**Riesgos residuales, limitaciones de uso, información adicional:** El usuario debe comunicar cualquier sospecha de acontecimiento adverso o un acontecimiento adverso concreto causado por el producto al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que reside. El fabricante realiza un análisis de riesgos detallado relacionado con el dispositivo médico evaluado como un proceso constante durante el diseño y desarrollo y en el proceso de la fase de producción del dispositivo médico de acuerdo a la norma EN ISO 13485:2016 y el Reglamento 2017/745/MDR. Se llevó a cabo un análisis de riesgos para el dispositivo médico evaluado según la norma EN ISO 14971:2019. El análisis de riesgos se actualiza de forma periódica según los resultados de vigilancia posterior a la comercialización del dispositivo médico /PMS/.

Definiciones de los símbolos	
	Vea las instrucciones de uso
	Util hasta
	Límite de temperaturas
	Marca de conformidad
	Número de referencia
	Advertencia
	El fabricante
	Número de lote
	Proteja del sol
	Dispositivo médico
	Identificador único del dispositivo

Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2023

## IT Foglio illustrativo fyotfontana VIROSTOP pastiglie sapore di frutti di bosco

 Leggere attentamente il foglio illustrativo prima dell'uso. Conservare il foglio illustrativo in caso di futuro utilizzo.

L'influenza e il raffreddore figurano tra le più comuni malattie infettive delle vie respiratorie con sintomi generali significativi. Inorgano all'improvviso, quindi è necessario agire rapidamente e in tempo. Queste malattie (compreso il comune raffreddore) sono causate da virus che vengono trasmessi all'organismo tramite infezione attraverso le mucose, dove iniziano a moltiplicarsi rapidamente. Si tratta di un dispositivo medico con meccanismo d'azione innovativo. Grazie ai polifenoli, di cui è assai ricco, l'estratto di cisto di Creta crea una pellicola protettiva sulle mucose della bocca e della gola. Questa barriera protettiva rappresenta una protezione fisica (meccanica) contro i virus e i batteri, impedendo la loro penetrazione e la loro ulteriore moltiplicazione. Il luogo di azione del dispositivo medico è la mucosa delle vie respiratorie superiori – nello specifico la mucosa del cavo orale per lo spray orale/pastiglie e la mucosa del cavo nasale per lo spray nasale. Gli altri componenti del prodotto – bioflavonoidi da agrumi, echinacea purpurea, salvia comune e ciliegia delle Barbados (acerola) rafforzano l'effetto neutralizzante antivirale.

**Composizione di 1 pastiglia:** estratto di cisto di creta (58 mg), estratto di echinacea purpurea (93,75 mg), estratto di salvia officinalis (27 mg), complesso di bioflavonoidi da agrumi (1,55 mg), estratto di acerola (75 mg), sorbitolo, xilitolo, acido citrico, stearato di magnesio, aroma: ciliegia, lampone, mirtillo

**Finalità d'impiego:** Fyotfontana VIROSTOP serve a formare una barriera di protezione contro i virus causa di infiammazione delle vie respiratorie superiori con applicazione sulla mucosa delle vie respiratorie superiori.

**Indicazioni:** Arrossamento della mucosa in caso di infiammazione delle vie respiratorie superiori.

**Principale meccanismo d'azione:** Il principale meccanismo d'azione del dispositivo medico fyotfontana VIROSTOP pastiglie consiste nel ricoprire le mucose del cavo orale con un film protettivo, impedendo così la penetrazione dei virus nell'organismo.

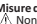
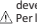
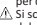
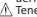
**Contraindicazioni:** Allergia a uno qualsiasi dei componenti del dispositivo medico (elencati nel paragrafo Composizione).

**Effetti collaterali:** Durante l'impiego di fyotfontana VIROSTOP pastiglie è possibile che avvertiate temporaneamente un leggero formicolio sulla lingua. Si tratta di sensazioni temporanee e naturali.

**Utilizzatori/patienti:** Il dispositivo medico fyotfontana VIROSTOP pastiglie è indicato per gli adulti e i bambini di età superiore a 12 anni.

**Limitazioni d'uso del dispositivo per la popolazione:** Il periodo di impiego del dispositivo medico dipende dal perdurare dei sintomi, ma non dovrebbe superare i 7 giorni.

### Misure di prevenzione e avvertenze:

-  Non impiegare nei bambini di età inferiore a 12 anni. La somministrazione del prodotto deve avvenire sempre sotto la supervisione di una persona adulta.
-  Per le donne in gravidanza e in allattamento si consiglia la consultazione con un medico per quanto riguarda l'uso.
-  Si consiglia di utilizzare il prodotto se avete subito interventi operatori nella regione del collo o bocca o se avete avuto danni alla mucosa delle vie respiratorie superiori.
-  Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Le eventuali leggere modifiche alla colorazione delle pastiglie sono dovute all'utilizzo di componenti vegetali nella composizione e non hanno alcuna influenza sulla qualità del prodotto.

**Dosaggio:** Gli adulti e i bambini di età superiore a 12 anni possono assumere, in caso di necessità, una pastiglia ogni 3–4 ore, ma al massimo 3 pastiglie al giorno. Le pastiglie sono idonee anche per uso preventivo a lungo termine. In caso di esposizione a rischio maggiore di infezione, è possibile consumare una pastiglia anche 5 volte al giorno. È assai importante l'applicazione serale prima di coricarsi e dopo essersi lavati i denti. Le pastiglie vanno succhiate. Non ingoiare le pastiglie intere e non morderle. Per ottenere gli effetti desiderati è necessario far sciogliere lentamente in bocca le pastiglie.

**L'apporto principale per il paziente è l'influenza sulla salute pubblica, utilizzando VIROSTOP dove:**

- I polifenoli sostengono l'immunità locale delle vie respiratorie superiori nello stadio precoce dell'infezione.
- Miglioramento della qualità della vita con riduzione della durata dei sintomi che causano le infezioni delle vie respiratorie superiori.
- L'uso preventivo di VIROSTOP nel periodo di aumentata presenza di infezione tra le persone riduce la predisposizione ai rischi di infezione delle vie respiratorie superiori.

**Contenuto della confezione:** 20 pastiglie in blister

# VIROSTOP

PASTILLES | PASTILLEN | PASTILLAS | PASTIGLIE




mint

minz | menta | menta



**EN** Instructions for use  
**fytofontana VIROSTOP pastilles**  
mint flavor

 Before use, carefully study the instructions for use. Keep the instructions for use in case of future use.

Cold and flu are among the most common infectious respiratory tract diseases with significant overall symptoms. They start suddenly, so it's important to intervene quickly and promptly. These diseases (including the common cold) are caused by viruses that are transmitted through infection via mucous membranes into the body, where they begin to rapidly multiply. This is a medical device with an innovative mechanism of action. Thanks to its rich content of polyphenols, the extract from *Cistus creticus* creates a protective film on the mucous membranes of the mouth and throat. This protective barrier constitutes a physical (mechanical) defense against viruses and bacteria, preventing their penetration and further multiplication. The site of action of the medical device is on the mucosa of the upper respiratory tract - specifically on the mucosa of the oral cavity for oral spray/pastilles and on the mucosa of the nasal cavity for nasal spray. Other ingredients included - citric bioflavonoids, purple coneflower (echinacea purpurea), common sage, and Barbados cherry (acerola) strengthen the antiviral neutralizing effect.

**Ingredients in 1 pastille:** *Cistus creticus* extract (58 mg), purple coneflower (echinacea purpurea) extract (93.75 mg), common sage (*Salvia officinalis*) extract (27 mg), citric bioflavonoid complex (1.55 mg), acerola extract (75 mg), sorbitol, xylitol, magnesium stearate, mint flavor

**Intended use:** Fytofontana VIROSTOP is intended as a protective barrier against viruses causing inflammation of the upper respiratory tract by application to the mucosa of the upper respiratory tract.

**Indications:** Redness of the mucosa in upper respiratory tract inflammation.

**Main mechanism of action:** The main mechanism of action of the medical device fytofontana VIROSTOP pastilles lies in its ability to cover the mucous membranes of the oral cavity with a protective film, thereby preventing the penetration of viruses into the body.

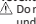

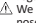
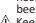
**Contraindications:** Allergy to any of the ingredients of the medical device (listed in the Ingredients section).

**Side effects:** When using fytofontana VIROSTOP pastilles, you may experience temporary mild irritation of the mucosa. These sensations are temporary and natural.

**Intended users/patients:** The medical device fytofontana VIROSTOP pastilles is intended for adults and children over 12 years old.

**Limitations of use for the population:** The duration of use of the medical device depends on the persistence of symptoms but should not exceed 7 days.

**Preventive measures and warnings:**

-  Do not use in children under 12 years of age. Older children should use the product only under the supervision of an adult.
-  For pregnant and breastfeeding women, consultation with a medical specialist regarding usage is recommended.
-  We do not recommend using the product if you have had surgical procedures in the nose or mouth area, or if the mucous membrane of the upper respiratory tract has been damaged.
-  Keep out of reach of small children.

Minor color variations in the pastilles are caused by the use of plant-based ingredients and do not affect the quality of the product in any way.

**Dosage:** Adults and children over 12 years old may suck on one pastille every 3-4 hours if necessary, but no more than 3 pastilles per day. The pastilles are suitable for long-term preventive use. In case of higher risk of infection, you can use them up to 5x a day. It is very important to use them in the evening before bedtime after brushing your teeth. The pastilles are intended for sucking. Do not swallow the pastilles whole or chew them. Allow them to dissolve slowly in the mouth to achieve the desired effect.

**The main benefit for the patient lies in the impact on public health through the use of VIROSTOP, where:**


- Polyphenols support the local immunity of the upper respiratory tract in the early stage of infection.
- Improvement in quality of life by reducing the duration of symptoms causing upper respiratory tract infections.
- Preventive use of VIROSTOP during periods of increased infection prevalence in communities reduces susceptibility to risks of upper respiratory tract infections.

**Package contents:** 20 pastilles in blisters

**Lifespan of the medical device:** The lifespan of the medical device is determined by the expiration date on the product packaging - 36 months from the date of manufacture.

**Accessory or compatible medical devices:** VIROSTOP medical device does not have any accessories or compatible medical devices.

**Storage:**


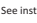










  The information is provided on the packaging

**Disposal:** Return any unused product to the pharmacy. Dispose of clean packaging materials in the appropriate recycling bin.

 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Slovak Republic, under license from Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Switzerland

[www.virostop.info](http://www.virostop.info)  
[www.fytofontana.com](http://www.fytofontana.com)

**Residual risks, limitations of use, further information:** Any suspicions of adverse events or adverse effects caused by the device should be reported by the user to the manufacturer and the relevant authority in the member state where the user resides. The manufacturer conducts a detailed risk analysis of the evaluated medical device as a continuous process during design and development and in the production phase of the medical device according to EN ISO 13485:2016 and Regulation 2017/745/MDR. A risk analysis according to EN ISO 14971:2019 has been developed for the evaluated medical device. The risk analysis is regularly updated based on the results of post-market surveillance of the medical device /PMS/.

Explanation of symbols	
	See instructions for use
	Best before
	Temperature limit
	Protect from sunlight
	Mark of conformity
	Reference number
	Warning
	Manufacturer
	Batch number
	Protect from sunlight
	Medical device
	Unique Device Identifier

Date of issue: 11.12.2023

**D** Gebrauchsanleitung  
**fytofontana VIROSTOP Pastillen**  
Minzgeschmack

 Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für den Fall eines weiteren Gebrauchs auf.

Grippe und Erkältungen gehören zu den häufigsten Infektionserkrankungen der Atemwege mit typischen Symptomen. Sie beginnen plötzlich, deshalb muss man schnell und rechtzeitig eingreifen. Diese Erkrankungen (einschließlich Schnupfen) werden von Viren ausgelöst, die bei einer Infektion über die Schleimhäute in den Organismus übertragen, wo sie sich schnell vermehren. Es handelt sich um ein Medizinprodukt mit innovativem Wirkmechanismus. Dank der reichlich enthaltenen Polyphenole bildet der Extrakt aus *Cistus creticus* einen Schutzfilm auf den Schleimhäuten von Mund und Hals. Diese Schutzbarriere dient zur physischen (mechanischen) Abwehr gegen Viren und Bakterien, verhindert ihr Eindringen und eine weitere Vermehrung. Das Medizinprodukt wirkt auf der Schleimhaut der oberen Atemwege – konkret auf der Mundschleimhaut bei Mundspray/Pastillen und auf der Nasenschleimhaut bei Nasenspray. Weitere Inhaltsstoffe – Zitrus-Bioflavonoide, Purpursonnenhut, Echter Salbei und Barbados-Kirsche (Acerola) verstärken die neutralisierende Wirkung gegen Viren.

**Zusammensetzung 1 Pastille:** Kretische Zistrose – Extrakt (58 mg), Purpursonnenhut – Extrakt (93,75 mg), Echter Salbei – Extrakt (27 mg), Zitrus-Bioflavonoid-Komplex (1,55 mg), Acerola-Extrakt (75 mg), Sorbitol, Xylitol, Magnesiumstearat, Minzaroma

**Bestimmungszweck:** Fytofontana VIROSTOP ist als Schutzbarriere gegen Viren bestimmt, die eine Entzündung der oberen Atemwege verursachen, indem es auf die Schleimhaut der oberen Atemwege aufgetragen wird.

**Indikation:** Schleimhautrötung bei Entzündung der oberen Atemwege.

**Hauptwirkungsmechanismus:** Der Hauptwirkungsmechanismus des Medizinprodukts fytofontana VIROSTOP Pastillen besteht darin, dass es die Schleimhäute der Mundhöhle mit einem Schutzfilm bedeckt und so ein Eindringen der Viren in den Körper verhindert.



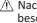

**Kontraindikationen:** Allergien auf einen Bestandteil des Medizinprodukts (die im Abschnitt Zusammensetzung angegeben sind).

**Nebenwirkungen:** Nach der Anwendung von fytofontana VIROSTOP Pastillen kann es vorübergehend zu einem leichten Kribbeln auf der Zunge kommen. Diese Gefühle sind vorübergehend und natürlich.

**Vorgesehene Benutzer/Patienten:** Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP Pastillen ist für Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren bestimmt.

**Nutzungseinschränkungen des Produkts für die Bevölkerung:** Die Anwendungsdauer des Medizinprodukts hängt vom Anhalten der Symptome ab, sollte aber nicht mehr als 7 Tage betragen.

**Prophylaktische Maßnahmen und Hinweise:**

-  Nicht bei Kindern unter 12 Jahren verwenden. Ältere Kinder sollten das Präparat nur unter der Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
-  Schwangeren und stillenden Frauen wird hinsichtlich des Gebrauchs die Rücksprache mit einem Facharzt empfohlen.
-  Nach chirurgischen Eingriffen im Nasen- und Mundbereich oder bei einer beschädigten Schleimhaut der oberen Atemwege wird von der Verwendung des Präparats abgeraten.
-  Außerhalb der Reichweite von Kleinkindern aufbewahren.

Eine leichte Verfärbung der Pastillen ist auf die Verwendung von pflanzlichen Inhaltsstoffen zurückzuführen und beeinträchtigt die Qualität des Präparats in keiner Weise.

**Dosierung:** Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren können bei Bedarf aller 3–4 Stunden eine Pastille lutschen, allerdings höchstens 3 Pastillen am Tag. Die Pastillen sind auch für die langzeitige vorbeugende Anwendung geeignet. Wenn Sie einem erhöhten Ansteckungsrisiko ausgesetzt sind, können Sie die Pastillen auch 5x täglich anwenden. Sehr wichtig ist die Anwendung abends nach dem Schlafen, vor dem Schlafen. Die Pastillen sind zum Lutschen bestimmt. Die Pastillen nicht im Ganzen schlucken oder zerbeißen. Für die erwünschte Wirkung sollen sie sich langsam im Mund auflösen.

**Der Hauptnutzen für den Patienten besteht im Einfluss auf die öffentliche Gesundheit durch die Verwendung von VIROSTOP, denn:**



- Polyphenole fördern die lokalen Abwehrkräfte der oberen Atemwege im Frühstadium der Infektion.
- Eine Verbesserung der Lebensqualität durch die Verkürzung der Symptome einer Infektion der oberen Atemwege.
- Die prophylaktische Anwendung von VIROSTOP in Zeiten eines vermehrten Auftretens von Infektionen im Kollektiv verringert die Anfälligkeit für Infektionen der oberen Atemwege.

**Packungsinhalt:** 20 Pastillen in Blistern


**Halbbarkeitsdauer des Medizinprodukts:** Die Halbbarkeitsdauer des Medizinprodukts wird durch das Verfallsdatum auf der Produktverpackung bestimmt – 36 Monate ab dem Herstellungsdatum.

**Zubehör oder kompatible Medizinprodukte:** Das Medizinprodukt fytofontana VIROSTOP hat kein Zubehör und auch keine kompatiblen Medizinprodukte.

**Lagerung:**




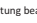







  Angaben sind auf der Verpackung angegeben

**Entsorgung:** Das unverbrauchte Präparat in die Apotheke zurückbringen. Sauberes Verpackungsmaterial im entsprechenden Sammelbehälter entsorgen.

 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Slowakejská republika nach einer Lizenz der Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Schweiz

[www.virostop.info](http://www.virostop.info)  
[www.fytofontana.com](http://www.fytofontana.com)

**Restrisiken, Gebrauchseinschränkungen, weitere Informationen:** Jeden Verdacht auf ein unerwünschtes Ereignis oder ein unerwünschtes Ereignis, das durch das Produkt verursacht wurde, sollte der Anwender dem Hersteller und der zuständigen Behörde in dem Mitgliedsstaat melden, in dem der Anwender seinen Wohnsitz hat. Der Hersteller führt eine detaillierte Risikoanalyse des zu bewertenden Medizinprodukts als fortlaufenden Prozess während der Entwicklungs- und Entwicklungs- sowie der Produktionsphase des Medizinprodukts gemäß EN ISO 13485:2016 und der Verordnung 2017/745/MDR/ durch. Für das zu bewertende Medizinprodukt wurde eine Risikoanalyse gemäß EN ISO 14971:2019 erstellt. Die Risikoanalyse wird regelmäßig auf der Grundlage der Ergebnisse der Überwachung des Medizinprodukts nach dem Inverkehrbringen/PMS/ aktualisiert.

Erläuterung der Symbole	
	Gebrauchsanleitung beachten
	Verwendbar bis
	Temperaturbegrenzung
	CE-Kennzeichnung
	Referenznummer
	Vorsicht
	Hersteller
	Chargennummer
	Vor Sonnenlicht schützen
	Medizinprodukt
	Einmalige Produktkennung


Ausstellungsdatum: 11.12.2023



mint | minz | menta | menta

VIROSTOP PASTILLEN | PASTILLEN PASTILLAS | PASTIGLIE

**ES** Instrucciones de uso  
**fytofontana VIROSTOP pastillas**  
Sabor a menta

 Antes de usar, lea atentamente las instrucciones de uso. Guarde las instrucciones de uso en caso de que las necesite en el futuro.

La gripe y el resfriado pertenecen a las enfermedades respiratorias contagiosas más frecuentes y se caracterizan por síntomas generales muy evidentes. Empezian de inmediato, por eso es necesario tomar acción rápidamente y a tiempo. Estas enfermedades (goteo nasal incluido) son causadas por virus que se contagian a través de la mucosa al organismo y se replican muy rápido. Se trata de un dispositivo médico con un mecanismo de acción innovativo. El extracto de *cistus creticus* crea una película protectora sobre la mucosa bucal y la garganta gracias a su abundante contenido en polifenoles. Esta barrera protectora es una protección física (mecánica) contra los virus y bacterias, porque inhibe su penetración y consiguiente replicación en el organismo. El lugar de actuación del dispositivo médico es la mucosa de las vías respiratorias superiores, en concreto, la mucosa de la cavidad bucal, en el caso del spray oral/pastillas, y la mucosa de la cavidad nasal, en el caso del spray nasal. Otros ingredientes incluidos – bioflavonoides cítricos, echinacea purpurea, salvia officinalis y acerola, que refuerzan el efecto neutralizante antiviral.

**Ingredientes en 1 pastilla:** Extracto de *Cistus creticus* (58 mg), extracto de echinacea purpurea (93,75 mg), extracto de salvia officinalis (27 mg), complejo de bioflavonoides cítricos (1,55 mg), extracto de acerola (75 mg), sorbitol, xilitol, estearato de magnesio, aroma de menta

**Objetivo de uso:** Fytofontana VIROSTOP se usa como barrera protectora ante los virus que causan la inflamación de las vías respiratorias superiores y se aplica sobre la mucosa de las vías respiratorias superiores.

**Indicación:** Para el enrojecimiento de la mucosa como resultado de la inflamación de las vías respiratorias superiores.

**Mecanismo de acción principal:** El mecanismo de acción principal del dispositivo médico fytofontana VIROSTOP pastillas consiste en cubrir la mucosa de la cavidad bucal con una película protectora e inhibir así la penetración de los virus al organismo.

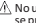

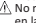
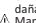
**Contraindicaciones:** Reacción alérgica a cualquier ingrediente del dispositivo médico (mencionado en el párrafo Ingredientes).

**Efectos secundarios:** Al utilizar fytofontana VIROSTOP pastillas puede sentir temporalmente un leve hormigueo en la lengua. Estos efectos son temporales y naturales.

**Usuarios/pacientes designados:** El dispositivo médico fytofontana VIROSTOP pastillas está destinado a adultos y a niños mayores de 12 años.

**Restricciones de uso del dispositivo para la población:** El periodo de uso del dispositivo médico depende de la duración de los síntomas, pero no se recomienda usarlo más de 7 días.

**Medidas preventivas y advertencias:**

-  No utilizar en niños menores de 12 años. En caso de niños a partir de 6 años el producto se puede utilizar solo bajo la supervisión de un adulto.
-  En caso de mujeres embarazadas y lactantes se recomienda consultar el uso con el médico especializado.
-  No recomendamos el uso del producto, si usted ha sido intervenido quirúrgicamente en la zona de la nariz o la boca o si la mucosa de las vías respiratorias superiores está dañada.
-  Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Los leves cambios del color de las pastillas están causados por el uso de ingredientes herbales y no influyen la calidad de la preparación de ninguna manera.

**Dosificación:** Si es necesario, los adultos y niños a partir de 12 años pueden chupar una pastilla cada 3–4 horas, sin embargo, no se debe exceder un máximo de 3 pastillas por día. Las pastillas son adecuadas también para el uso preventivo prolongado. Si está expuesto a un mayor riesgo de infección, puede chupar hasta 5 pastillas al día. Es especialmente importante la aplicación abiendo después de dormir, después de lavarse los dientes. Las pastillas se deben chupar. No trague las pastillas enteras ni las muerda. Para un efecto óptimo debe dejar que las pastillas se disuelvan lentamente en la boca.

**El beneficio principal para el paciente es el impacto en la salud pública al usar VIROSTOP pues:**



- Los polifenoles refuerzan la inmunidad local de las vías respiratorias superiores en la etapa temprana de la infección.
- Mejora de la calidad de vida al reducir la duración de los síntomas que causan la infección de las vías respiratorias superiores.
- El uso preventivo de VIROSTOP durante el periodo de mayor incidencia de infecciones en grupos disminuye la susceptibilidad a los riesgos de infección de las vías respiratorias superiores.

**Contenido del paquete:** 20 pastillas en blisteres

**Vida útil del dispositivo médico:** La vida útil del dispositivo médico se determina por la fecha de expiración impresa en el embalaje del producto: 36 meses desde la fecha de fabricación.

**Accesorios o dispositivos médicos compatibles:** El dispositivo médico fytofontana VIROSTOP no tiene accesorios ni dispositivos médicos compatibles.

**Almacenamiento:**

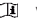
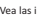









  Los datos están indicados en el embalaje

**Disposición de residuos:** Devuelva la preparación no utilizada a la farmacia. Deseche el material de embalaje limpio en el contenedor adecuado para los residuos clasificados.

 Herb-Pharma Corporation s.r.o., 935 65 Veľké Ludince, Eslovaquia según la licencia Herb-pharma AG Schweiz, Waldmannstrasse 6, 8001 Zürich, Suiza


[www.virostop.info](http://www.virostop.info)  
[www.fytofontana.com](http://www.fytofontana.com)

**Riesgos residuales, limitaciones de uso, información adicional:** El usuario debe comunicar cualquier sospecha de acontecimiento adverso o un acontecimiento adverso concreto causado por el producto al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que reside. El fabricante realiza un análisis de riesgos detallado relacionado con el dispositivo médico evaluado como un proceso constante durante el diseño y desarrollo y en el proceso de la fase de producción del dispositivo médico de acuerdo a la norma EN ISO 13485:2016 y el Reglamento 2017/745/MDR. Se llevó a cabo un análisis de riesgos para el dispositivo médico evaluado según la norma EN ISO 14971:2019. El análisis de riesgos se actualiza de forma periódica según los resultados de vigilancia posterior a la comercialización del dispositivo médico /PMS/.

Definiciones de los símbolos	
	Vea las instrucciones de uso
	Util hasta
	Límite de temperaturas
	Marca de conformidad
	Número de referencia
	Advertencia
	El fabricante
	Número de lote
	Proteja del sol
	Dispositivo médico
	Identificador único del dispositivo

Fecha de publicación: 11 de diciembre de 2023

**IT** Foglio illustrativo  
**fytofontana VIROSTOP pastiglie**  
sapore di menta

 Leggere attentamente il foglio illustrativo prima dell'uso. Conservare il foglio illustrativo in caso di futuro utilizzo.

L'influenza e il raffreddore figurano tra le più comuni malattie infettive delle vie respiratorie con sintomi generali significativi. Inorgano all'improvviso, quindi è necessario agire rapidamente e in tempo. Queste malattie (compreso il comune raffreddore) sono causate da virus che vengono trasmessi all'organismo tramite infezione attraverso le mucose, dove iniziano a moltiplicarsi rapidamente. Si tratta di un dispositivo medico con meccanismo d'azione innovativo. Grazie ai polifenoli, di cui è assai ricco, l'estratto di *cisto di Creta* crea una pellicola protettiva sulle mucose della bocca e della gola. Questa barriera protettiva rappresenta una protezione fisica (meccanica) contro i virus e i batteri, impedendo la loro penetrazione e la loro ulteriore moltiplicazione. Il luogo di azione del dispositivo medico è la mucosa delle vie respiratorie superiori – nello specifico la mucosa del cavo orale per lo spray orale/pastiglie e la mucosa del cavo nasale per lo spray nasale. Gli altri componenti del prodotto – bioflavonoidi da agrumi, echinacea purpurea, salvia comune e ciliegia delle Barbados (acerola) rafforzano l'effetto neutralizzante antivirale.

**Composizione di 1 pastiglia:** estratto di *cisto di creta* (58 mg), estratto di echinacea purpurea (93,75 mg), estratto di salvia officinalis (27 mg), complesso di bioflavonoidi da agrumi (1,55 mg), estratto di acerola (75 mg), sorbitolo, xilitolo, stearato di magnesio, aroma di menta

**Finalità d'impiego:** Fytofontana VIROSTOP serve a formare una barriera di protezione contro i virus causa di infiammazione delle vie respiratorie superiori con applicazione sulla mucosa delle vie respiratorie superiori.

**Indicazioni:** Arrossamento della mucosa in caso di infiammazione delle vie respiratorie superiori.

**Principale meccanismo d'azione:** Il principale meccanismo d'azione del dispositivo medico fytofontana VIROSTOP pastiglie consiste nel ricoprire le mucose del cavo orale con un film protettivo, impedendo così la penetrazione dei virus nell'organismo.





**Controindicazioni:** Allergia a uno qualsiasi dei componenti del dispositivo medico (elencati nel paragrafo Composizione).

**Effetti collaterali:** Durante l'impiego di fytofontana VIROSTOP pastiglie è possibile che avvertiate temporaneamente un leggero formicolio sulla lingua. Si tratta di sensazioni temporanee e naturali.

**Utilizzatori/patienti:** Il dispositivo medico fytofontana VIROSTOP pastiglie è indicato per gli adulti e i bambini di età superiore a 12 anni.

**Limitazioni d'uso del dispositivo per la popolazione:** Il periodo di impiego del dispositivo medico dipende dal perdurare dei sintomi, ma non dovrebbe superare i 7 giorni.

**Misure di prevenzione e avvertenze:**

-  Non impiegare nei bambini di età inferiore a 12 anni. La somministrazione del prodotto deve avvenire sempre sotto la supervisione di una persona adulta.
-  Per le donne in gravidanza e in allattamento si consiglia la consultazione con un medico per quanto riguarda l'uso.
-  Si sconsiglia di utilizzare il prodotto se avete subito interventi operatori nella regione del collo o bocca o se avete avuto danni alla mucosa delle vie respiratorie superiori.
-  Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini.

Le eventuali leggere modifiche alla colorazione delle pastiglie sono dovute all'utilizzo di componenti vegetali nella composizione e non hanno alcuna influenza sulla qualità del prodotto.

**Dosaggio:** Gli adulti e i bambini di età superiore a 12 anni possono assumere, in caso di necessità, una pastiglia ogni 3–4 ore, ma al massimo 3 pastiglie al giorno. Le pastiglie sono idonee anche per uso preventivo a lungo termine. In caso di esposizione a rischio maggiore di infezione, è possibile assumere una pastiglia anche 5 volte al giorno. È assai importante l'applicazione serale prima di coricarsi e dopo essersi lavati i denti. Le pastiglie vanno succhiate. Non ingoiare le pastiglie intere e non morderle. Per ottenere gli effetti desiderati è necessario far sciogliere lentamente in bocca le pastiglie.

**L'apporto principale per il paziente è l'influenza sulla salute pubblica, utilizzando VIROSTOP dove:**

- I polifenoli sostengono l'immunità locale delle vie respiratorie superiori nello stadio precoce di un'infezione.
- Miglioramento della qualità della vita con riduzione della durata dei sintomi che causano le infezioni delle vie respiratorie superiori.
- L'uso preventivo di VIROSTOP nel periodo di aumentata presenza di infezione tra le persone riduce la predisposizione ai rischi di infezione delle vie respiratorie superiori.

**Contenuto della confezione:** 20 pastiglie in blister

**Ciclo di vita del dispositivo medico:** Il ciclo di vita del dispositivo medico è determinato dalla